



INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DE DESMONTAJE Y SANITIZACIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO

1. ALCANCE.

Inicia al quedar sola la habitación posterior al egreso del paciente, dando manejo al equipo electromédico, retirar ropa hospitalaria, equipos, frasco y clasificar RPBI, termina cuando la habitación está lista para el aseo.

2. MATERIAL Y EQUIPO

- Material
 - SURFA-SAFE.
 - Franela morada.
 - Tánico de traslado.
 - Bote de basura.
 - Bolsa para RPBI.
- Equipo
 - Equipo electromédico usado durante la atención del paciente (bomba de infusión, pentapie, monitor de signos vitales, desfibrilador).

3. DESARROLLO

No.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
5.1	Enfermería	Identifica material a desechar como basura común: frascos, equipos de infusión, pañales, gasas, etc. y lo deposita en el bote correspondiente.
	Enfermería	Notifica a terapia respiratoria sobre el alta de pacientes que recibían oxígeno suplementario.
	Terapia respiratoria	Retira equipos, dispositivos, humidificadores y realiza la limpieza y sanitización correspondiente a su área. "IT-JE-43 sanitización y desinfección de equipo reusable de terapia respiratoria".
5.2	Enfermería	Identifica y clasifica material considerado RPBI y realiza su desecho de acuerdo con "PR-JE-08 Proceso para el manejo de RPBI" y

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DE DESMONTAJE Y SANITIZACIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO

		“NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 <i>protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológicoinfecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo”.</i>
5.3	Enfermería	Sigue lo mencionado en “IT-JE-27 Retiro y clasificación de ropa sucia o contaminada” e IT-JE-46 <i>Manejo de ropa hospitalaria.</i> Retira ropa sucia y la clasifica como contaminada y no contaminada. Cuenta y deposita en tánico de traslado la ropa no contaminada y la traslada al séptico para colocarla en el tánico grande. Cuenta y deposita en bolsa transparente la ropa contaminada y coloca etiqueta correspondiente.
5.4	Enfermería	Registra en el formato TF-JE-42 <i>vale de ropa sucia</i> toda la ropa considerada como sucia.
5.5	Enfermería	Retira equipo electromédico de habitación o unidad que no queda en cultivo (bombas de infusión, monitores, oxímetro), y realiza la sanitización correspondiente con SURFA-SAFE y franela morada, posterior lo coloca en el lugar que le corresponde conectándolos a la luz.
5.6	Enfermería	Si la habitación o cubículo queda en cultivo, el equipo electromédico se limpia y se queda en la habitación; se retira hasta que el cultivo salga negativo.
5.7	Enfermería	Revisará que en la habitación no quede material por desechar o equipo (jeringas, agujas, frascos de soluciones, equipo electromédico, etc.)
5.8	Enfermería	Informa a el área de intendencia para proceder con la sanitización de la habitación y el mobiliario (colchón, cama, buro, tripie, mesa puente, otros) De acuerdo con el “PR-UV-02 Proceso para la preparación de habitación”.

4. GESTIÓN DE RIESGOS.

Riesgo	Barrera de Seguridad
a. RPBI desechado de manera incorrecta	a. Apego al proceso para el manejo de RPBI y la NOM-087.



INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DE DESMONTAJE Y SANITIZACIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO

4. GESTIÓN DE RIESGOS.

Riesgo	Barrera de Seguridad
a. RPBI desechado de manera incorrecta	a. Apego al proceso para el manejo de RPBI y la NOM-087. b. Abastecimiento de bolsa roja y amarilla para RPBI en los diferentes servicios.
b. Basura común olvidada en habitación.	c. Capacitar al personal sobre la identificación y desecho correcto de frascos, equipos y pañales.
c. Equipo electromédico sanitizado de manera incorrecta.	d. Abastecer SURFA-SAFE y franela morada en todos los servicios. e. Vigilar apego a la limpieza correcta del equipo electromédico.

5. ANEXOS.

5.1 Documentos de referencia.

Nombre del documento	Código
NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo	No Aplica
Proceso para el manejo de RPBI	PR-JE-08
Retiro y clasificación de ropa sucia o contaminada	IT-JE-27
Manejo de ropa hospitalaria	IT-JE-46
Vale de ropa sucia	FT-JE-42
Proceso para la preparación de habitación	PR-UV-02



INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DE DESMONTAJE Y SANITIZACIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO

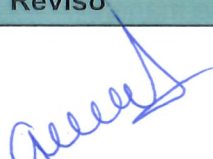
Sanitización y desinfección de equipo reusable de terapia respiratoria

IT-JE-43

6. CONTROL DE CAMBIOS.

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Realizado	Aprobado
01	Julio 2021	Alta de documento	Toledo Casas Gerardo	Ana Cecilia Zarate Bautista
02	Agosto 2024	Actualización de documento	Mendoza Garcia Mayda Guadalupe	Ana Cecilia Zarate Bautista
03	Septiembre 2025	Actualización de documento	Mendoza Garcia Mayda Guadalupe	Juan Carlos Vanegas Reyes

7. AUTORIZACIÓN.

Elaboró	Revisó	Autorizó
 Lic. Juan Carlos Vanegas Reyes	 Dra. Giselle Ivette De la Torre García	 Hna. María de Jesús García Castro
Jefatura de enfermería	Jefatura de Calidad	Dirección General