



INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA LA TÉCNICA DE SANITIZACIÓN DE LA MÁQUINA DE HEMODIÁLISIS

1. ALCANCE.

Inicia en el momento que finaliza sesión de hemodiálisis del paciente y termina al dejar la máquina lista para la conexión de nuevas líneas.

2. MATERIAL Y EQUIPO

Describe el material y equipo necesarios para la realización de la actividad en mención.

- Material
 - SURFA-SAFE.
 - Franela morada.
 - Compresa o gasa.
 - Cubrebocas.
 - Guante crudo.
 - Bote de RPBI.
 - Bote de basura común.

3. DESARROLLO

No.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
5.1	Enfermería	Terminada la sesión de hemodiálisis y egresado el paciente inicia con la limpieza de la máquina.
5.2	Enfermería	Realiza higiene de manos "IT-UV-01 Higiene de manos con agua y jabón" y retira el circuito de la máquina de hemodiálisis y lo desecha "PR-JE-08 Manejo de RPBI".
5.3	Enfermería	Regresa la lanceta colocada en el bidón del potasio a su lugar y se desmonta el bibag, se asegura de cerrar bien la ventana.
5.4	Enfermería	Presiona el botón de desinfección, posterior a asegurarse que la máquina está desmontada. (el proceso de la maquina dura 16 minutos).



INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA LA TÉCNICA DE SANITIZACIÓN DE LA MÁQUINA DE HEMODIÁLISIS

5.5	Enfermería	Procede a realizar una limpieza y desinfección de la máquina de manera manual con surfa-safe y franela morada (mientras se realiza el proceso de desinfección).
5.6	Enfermería	Retirar con gasa o compresa impregnada con surfa-safe, los derrames de contenido hemático,
5.7	Enfermería	Solicita a jefatura de enfermería SURFASAFE y la franela morada.
5.8	Enfermería	Respeta el tiempo de desinfección entre sesiones.
5.9	Enfermería	Al terminar la desinfección, la maquina esta lista para realizar el montaje de la nueva sesión; realiza higiene de manos "IT-UV-01 Higiene de manos con agua y jabón"

4. GESTIÓN DE RIESGOS.

Riesgo	Barrera de Seguridad
a. SURFASAFE o franela insuficiente o en mal estado.	a. Solicitud con antelación de insumos a jefatura de enfermería.
b. Proceso de limpieza omitido por parte del personal.	b. Respeta las horas de programación y el tiempo de desinfección entre sesiones.

5. ANEXOS.

5.1 Documentos de referencia.

Nombre del documento	Código
Higiene de manos con agua y jabón	IT-UV-01
Manejo de RPBI	PR-JE-08

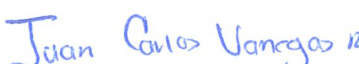


INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA LA TÉCNICA DE SANITIZACIÓN DE LA MÁQUINA DE HEMODIÁLISIS

6. CONTROL DE CAMBIOS.

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Realizado	Aprobado
01	Julio 2021	Alta de documento	Toledo Casas Gerardo	Ana Cecilia Zarate Bautista
02	Agosto 2024	Actualización de documento	Mendoza Garcia Mayda Guadalupe	Ana Cecilia Zarate Bautista
03	Septiembre 2025	Actualización de documento	Mendoza Garcia Mayda Guadalupe	Juan Carlos Vanegas Reyes

7. AUTORIZACIÓN.

Elaboró	Revisó	Autorizó
 Lic. Juan Carlos Vanegas Reyes	 Dra. Giselle Ivette De la Torre García	 Hna. María de Jesús García Castro
Jefatura de enfermería	Jefatura de Calidad	Dirección General

