

1. ALCANCE.

Este documento inicia cuando el médico tratante solicita la prueba de PCT para ayudar en la evaluación de pacientes con sospecha de infección bacteriana, trauma o shock, y termina cuando se procesa.

2. MATERIAL Y EQUIPO

2.1 Material

1. Guantes
2. Cubrebocas
3. Papel para impresora
4. Bata
5. Puntillas
6. Pipeta de 100 µl

2.2 Reactivos

1. Cartucho de prueba.
2. Tubo oro con suero de paciente.

2.3 Equipo

1. GETEIN 1100

3. DESARROLLO

No.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
3.1	Químico laboratorista y/o Técnico laboratorista	Procedimiento de la prueba: Recolectar la muestra en tubo oro, procurar no hemolizar la muestra.
3.2	Químico laboratorista y/o Técnico laboratorista	Confirme el número de lote de la tarjeta SD de acuerdo con el lote del kit de la prueba. Realice la calibración de Tarjeta SD cuando sea necesario.
3.3	Químico laboratorista y/o Técnico laboratorista	Retire la tarjeta de prueba de la bolsa sellada inmediatamente antes de usarla.

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA PROCESAR TEST PCT

3.4	Químico laboratorista y/o Técnico laboratorista	Edite la información del paciente: Nombre, sexo, edad, ID, muestra, nombre del ítem, auto.
3.5	Químico laboratorista y/o Técnico laboratorista	Etiquetar la tarjeta de prueba con los 4 últimos dígitos del ID del paciente.
3.6	Químico laboratorista y/o Técnico laboratorista	Coloque la tarjeta de prueba en la meseta limpia, colocada horizontalmente.
3.7	Químico laboratorista y/o Técnico laboratorista	Pipetear 100 µl de muestra (Suero).
3.8	Químico laboratorista y/o Técnico laboratorista	Coloque 100µl de la mezcla de muestra en el orificio de muestra de la tarjeta de prueba.
3.9	Químico laboratorista y/o Técnico laboratorista	Inserte la tarjeta de prueba en el Getein 1100 con la flecha apuntando hacia el equipo y presione el botón Comenzar.
3.10	Químico laboratorista y/o Técnico laboratorista	Una vez transcurridos los 15 minutos de reacción el resultado se mostrará en la pantalla e imprimirá automáticamente.
3.11	Químico laboratorista y/o Técnico laboratorista	Reportar en el sistema Eclipse.
3.12	Químico laboratorista y/o Técnico laboratorista	Registro en Bitácora de Resultados de Análisis de Hematología FT-LA-01.

4. GESTIÓN DE RIESGOS.

Riesgo	Barrera de Seguridad
a. Muestra hemolizada	a. Tomar la muestra adecuadamente evitando hacer mucha presión al momento de la toma.
b. Muestra insuficiente	b. Tomar al paciente la muestra llenando el tubo hasta la marca.
c. Reactivo caducado	c. Revisar la caducidad del reactivo antes de usarlo y llevar el inventario al día.

5. ANEXOS.

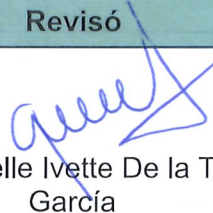
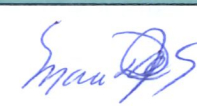
5.1 Documentos de referencia.

Nombre del documento	Código
Inserto de PCT Fast Test Kit (Immunofluorescence Assay)	No Aplica
Registro en Bitácora de Resultados de Análisis de Hematología	FT-LA-01

6. CONTROL DE CAMBIOS.

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Realizado	Aprobado
1	09-2019	Alta	QFB. Eloísa González Beas	Mtra. Ana Cecilia Zarate Bautista
2	09-2022	Modificación	QFB. Maria del Refugio Valadez Rivas	Mtra. Ana Cecilia Zarate Bautista
3	09-2023	Modificación	QFB. Maria del Refugio Valadez Rivas	Mtra. Ana Cecilia Zarate Bautista
4	09-2025	Modificación	QFB. Maria del Refugio Valadez Rivas	

7. AUTORIZACIÓN.

Elaboró	Revisó	Autorizó
 QFB. Maria del Refugio Valadez Rivas Jefatura de Servicio de Laboratorio	 Dra. Giselle Ivette De la Torre García Jefatura de Calidad	 Hna. Maria de Jesus Garcia Castro Dirección General