

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA CARGA AUTOMÁTICA DE CARTUCHOS EN EL EQUIPO VITROS 250

1. ALCANCE.

Este documento inicia cuando se requiere cargar cartuchos al equipo Vitros 250, y termina cuando se insertan los cartuchos.

2. MATERIAL Y EQUIPO

2.1 Material

1. Guantes desechables
2. Cubrebocas
3. Bata
4. Reactivos

Químicas de Tambor de Reactivos SS1		Químicas de Tambor de Reactivos SS2	
TP	K+	GLU	CK
TRIG	PHOS	CREA	CK-MB
CL-	Mg	ALTV	UPRO
CA	PCR	GGT	
BuBc	ALB	AST	
LIPA	AMYL	LDHI	
URIC	Na+	PROT	
CHOL	BUN	AMON	
TBIL		ALKP	

2.3 Equipo

1. Refrigerador
2. Vitros 250

3. DESARROLLO

No.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
3.1	Químico laboratorista y/o Técnico laboratorista	Revisar el inventario de slides en el menú principal del equipo dando clic en Manejo de cartuchos después seleccionar Inventario de slides.
3.2	Químico laboratorista	Automática: Saque los cartuchos si es que lo requiere

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA CARGA AUTOMÁTICA DE CARTUCHOS EN EL EQUIPO VITROS 250

	y/o Técnico laboratorista	de su lugar de almacenamiento (refrigerador o congelador).
3.3	Químico laboratorista y/o Técnico laboratorista	Con el cartucho aún en el envoltorio, espere a que alcance la temperatura ambiente 18 – 28°C. (30 minutos si estaba en un refrigerador, o 60 minutos si estaba en el congelador, El tiempo mínimo de calentamiento para Sodio (Na+) es de 2 Horas).
3.4	Químico laboratorista y/o Técnico laboratorista	Desenvolver el cartucho; observe el color de la etiqueta que está a un extremo e identifique la estación correcta para cargar el cartucho. Alimentador 1 de laminillas reactivas (derecha), etiqueta superior amarilla. Alimentador 2 de laminillas reactivas (izquierda), etiqueta superior blanca.
3.5	Químico laboratorista y/o Técnico laboratorista	Y con un movimiento suave y continuo inserte firmemente el cartucho en la estación de carga, hasta que tope.
3.6	Químico laboratorista y/o Técnico laboratorista	La unidad de control emitirá una señal sonora que indica que el cartucho fue aceptado para cargarlo. Si no escucha esa señal, el cartucho puede no estar orientado correctamente o el lector de códigos de barras no leyó la etiqueta. Nota: Si después de varios intentos no se escucha la señal, trate de cargar el cartucho manualmente.
3.7	Químico laboratorista y/o Técnico laboratorista	El analizador cargará el cartucho tan pronto como se disponga de un pozo vacío, y cuando la carga no interfiera con el proceso de la laminilla reactiva que se analiza en ese momento.
3.8	Químico laboratorista y/o Técnico laboratorista	Nota: Si la generación de laminillas reactivas por cargar es distinta de la generación(es) que en ese momento están en el analizador, aparecerá un mensaje en línea de instrucciones: Carga cancelada. Seguir el diálogo de carga de nueva generación. en ese momento.

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA CARGA AUTOMÁTICA DE CARTUCHOS EN EL EQUIPO VITROS 250

4. GESTIÓN DE RIESGOS.

Riesgo	Barrera de Seguridad
a. Carga errónea de cartucho (tambor no correspondiente).	a. Verifique el cartucho antes de cargarlo en el analizador.
b. Carga de cartucho nueva generación.	b. Revisar que sea la misma generación que está cargada.
c. No atemperar lo suficiente el cartucho antes de ingresarlo al analizador.	c. No saltar el tiempo atemperado.

5. ANEXOS.

5.1 Documentos de referencia.

Nombre del documento	Código
Manual del equipo Vitros 250 Ortho Clinical Diagnostics J&J	No Aplica

6. CONTROL DE CAMBIOS.

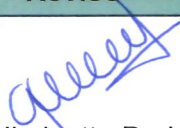
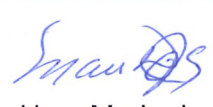
Versión	Fecha	Descripción del cambio	Realizado	Aprobado
1	09-2019	Alta	QFB. Eloísa González Beas	Mtra. Ana Cecilia Zarate Bautista
2	09-2022	Modificación	QFB. Maria del Refugio Valadez Rivas	Mtra. Ana Cecilia Zarate Bautista
3	09-2023	Modificación	QFB. Maria del Refugio Valadez Rivas	Mtra. Ana Cecilia Zarate Bautista



INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA CARGA AUTOMÁTICA DE CARTUCHOS EN EL EQUIPO VITROS 250

4	29/09/2025	Modificación	QFB. Maria del Refugio Valadez Rivas	Dra. Giselle Ivette De la Torre García
---	------------	--------------	--------------------------------------	--

7. AUTORIZACIÓN.

Elaboró	Revisó	Autorizó
 QFB. Maria del Refugio Valadez Rivas	 Dra. Giselle Ivette De la Torre García	 Hna. Maria de Jesus Garcia Castro
Jefatura de Servicio de Laboratorio	Jefatura de Calidad	Dirección General