



INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA DETECCIÓN DE DENGUE NS1 Ag – IgG E IgM Ac

1. ALCANCE.

Este documento inicia cuando el médico solicita prueba rápida para Dengue NS1 cuando el paciente presenta la sintomatología característica de esta patología, y termina cuando se procesa.

2. MATERIAL Y EQUIPO

1. Guantes desechables.
2. Cubrebocas.
3. Dispositivo de prueba.
4. Pipeta capilar.
5. Gotero desechable.

2.2 Reactivos

1. Diluyente del ensayo.

2.3 Equipo

1. Centrífuga.
2. Cronómetro.

3. DESARROLLO

No.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
3.1	Químico laboratorista y/o Técnico laboratorista	En primer lugar abra el envase y busque el siguiente contenido: • Dispositivo de prueba con desecantes (incluye indicador de humedad) en la bolsa de papel aluminio individual. • Diluyente del ensayo • Gotero desechable • Pipeta capilar • Instrucciones de uso
3.2	Químico laboratorista	Compruebe la fecha de caducidad en la parte posterior



INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA DETECCIÓN DE DENGUE NS1 Ag – IgG E IgM Ac

	y/o Técnico laboratorista	de la bolsa de papel aluminio. Si la fecha de caducidad ha vencido utilice otro lote.
3.3	Químico laboratorista y/o Técnico laboratorista	Abra la bolsa de papel aluminio y localice lo siguiente: • Pocillo par muestra para Dengue IgG e IgM • Pocillo del diluyente de ensayo • Pocillo para muestra Dengue NS1 • Indicador de humedad en desecantes Nota: Si el indicador de humedad es de color AMARILLO, etiquete el dispositivo con la identificación del paciente y continúe Si el indicador de humedad es VERDE, deseche el dispositivo y obtenga otro dispositivo para la prueba.
3.4	Químico laboratorista y/o Técnico laboratorista	Obtención de la muestra: Por venopunción, (no usar sangre capilar), plasma o suero. Tome un gotero y recoja la muestra (suero) por encima de la línea de llenado mínimo.
3.5	Químico laboratorista y/o Técnico laboratorista	Dispense 3 gotas (cerca de 100 µl aprox) de la muestra en el pocillo para muestras "S".
3.6	Químico laboratorista y/o Técnico laboratorista	Con una nueva pipeta capilar desechable, recoja suero hasta la línea de llenado (10 µl). Dispense 10 µ de la muestra en el pocillo para muestras "S" Precaución: No se debe usar muestras hemolizadas o almacenadas durante mucho tiempo. (más de 24 horas).
3.7	Químico laboratorista y/o Técnico laboratorista	Inmediatamente (en un plazo de 20 segundos) Dispense 4 gotas de diluyente de ensayo verticalmente en el pocillo de diluyente del ensayo. Deben agregarse exactamente 4 gotas mientras se sostiene el frasco en posición vertical.



INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA DETECCIÓN DE DENGUE NS1 Ag – IgG E IgM Ac

3.8	Químico laboratorista y/o Técnico laboratorista	Interprete los resultados de la prueba después de 15 a 20 minutos. Nota: Los resultados leídos después de los 20 minutos pueden ser imprecisos.
3.9	Químico laboratorista y/o Técnico laboratorista	Reportar en Bitácora de registro de resultados de análisis Química Clínica FT-LA-13.
3.10	Químico laboratorista y/o Técnico laboratorista	Reportar resultado en sistema eclipse.
3.11	Químico laboratorista y/o Técnico laboratorista	En caso de ser un resultado positivo y el paciente sea hospitalizado se informa al área de Epidemiología.

4. GESTIÓN DE RIESGOS.

Riesgo	Barrera de Seguridad
a. Carga errónea de cartucho (tambor no correspondiente).	a. Verifique el cartucho antes de cargarlo en el analizador.
b. Carga de cartucho nueva generación.	b. Revisar que sea la misma generación que está cargada.
c. No atemperar lo suficiente el cartucho antes de ingresarlo al analizador.	c. No saltar el tiempo atemperado.

5. ANEXOS.

5.1 Documentos de referencia.

Nombre del documento	Código
Inserto en uso de Test Dengue NS1-IgG/IgM	No Aplica



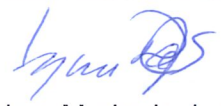
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA DETECCIÓN DE DENGUE NS1 Ag – IgG E IgM Ac

Bitácora de registro de resultados de análisis Química Clínica	FT-LA-13
--	----------

6. CONTROL DE CAMBIOS.

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Realizado	Aprobado
1	09-2019	Alta	QFB. Eloísa González Beas	Mtra. Ana Cecilia Zarate Bautista
2	09-2022	Modificación	QFB. Maria del Refugio Valadez Rivas	Mtra. Ana Cecilia Zarate Bautista
3	09-2023	Modificación	QFB. Maria del Refugio Valadez Rivas	Mtra. Ana Cecilia Zarate Bautista
4	29/09/2025	Modificación	QFB. Maria del Refugio Valadez Rivas	Dra. Giselle Ivette De la Torre García

7. AUTORIZACIÓN.

Elaboró	Revisó	Autorizó
 QFB. Maria del Refugio Valadez Rivas	 Dra. Giselle Ivette De la Torre García	 Hna. Maria de Jesus Garcia Castro
Jefatura de Servicio de Laboratorio	Jefatura de Calidad	Dirección General