

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA TOMA DE MUESTRA NASOFARÍNGEA

1. ALCANCE.

Este documento inicia cuando el médico tratante o el paciente por su cuenta solicita exámenes de laboratorio con muestras de región nasofaríngea, y termina cuando se realiza la toma.

2. MATERIAL Y EQUIPO

1. Guantes desechables.
2. Cubrebocas.
3. Bata
4. Hisopo
5. Tubo para recolección

2.2 Reactivos

1. Buffer

3. DESARROLLO

No.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
3.1	Químico laboratorista y/o Técnico laboratorista	Revisar en el expediente las indicaciones de exámenes de laboratorio indicados del día en curso por el médico tratante o en su caso por el médico de guardia. Si el paciente es externo, revisar la orden que expide su médico tratante.
3.2	Químico laboratorista y/o Técnico laboratorista	Realizar la solicitud de análisis anotando los siguientes datos: ✓ Nombre completo del paciente ✓ Fecha de nacimiento ✓ Diagnóstico ✓ Habitación ✓ Médico tratante ✓ Anotar si es particular o de aseguradora

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA TOMA DE MUESTRA NASOFARÍNGEA

		✓ Laboratoriales solicitados ✓ Fecha de la toma
3.3	Químico laboratorista y/o Técnico laboratorista	Realizar su lavado de manos aplicando los 5 momentos.
3.4	Químico laboratorista y/o Técnico laboratorista	Identificar al paciente por su nombre completo y fecha de nacimiento.
3.5	Químico laboratorista y/o Técnico laboratorista	Etiquete el tubo con el nombre del paciente de la muestra recolectada.
3.6	Químico laboratorista y/o Técnico laboratorista	Explicar al paciente el proceso de la toma, pedir que cubra solo su boca con el cubrebocas
3.7	Químico laboratorista y/o Técnico laboratorista	La cabeza del paciente tiene que estar ligeramente inclinada hacia atrás para que la toma sea adecuada y lo menos lastimosa posible. 
3.8	Químico laboratorista y/o Técnico laboratorista	Introducir el hisopo en cada una de las fosas nasales, hasta la nasofaringe, aprox 3-4 cm.
3.9	Químico laboratorista y/o Técnico laboratorista	Girar el hisopo hacia el lado externo de cada fosa de 2- 3 veces y retirarlo.
3.10	Químico laboratorista y/o Técnico laboratorista	Introducir el hisopo en el tubo de recolección, previamente identificado, con el buffer apropiado para el tipo de prueba requerida.
3.11	Químico laboratorista y/o Técnico laboratorista	Dispensar la cantidad de buffer o diluyente (según la prueba) con muestra que cada prueba requiera y dejar correr la prueba en el tiempo requerido.
3.12	Químico laboratorista	Desechar todo el material utilizado en el destino de

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA TOMA DE MUESTRA NASOFARÍNGEA

	y/o Técnico laboratorista	RPBI correspondiente.
3.13	Químico laboratorista y/o Técnico laboratorista	Lave sus manos.

4. GESTIÓN DE RIESGOS.

Riesgo	Barrera de Seguridad
a. Contagio por medio de expulsión de secreción del paciente.	a. Usar el equipo de protección todo el tiempo requerido en el proceso de toma.
b. Obtención de muestra no adecuada por cantidad.	b. El hisopado es efectivo cuando de toma de las dos fosas nasales.
c. Obtención de mala muestra por hisopado no profundo.	c. La toma debe ser profunda para poder obtener una muestra de mejor calidad.

5. ANEXOS.

5.1 Documentos de referencia.

Nombre del documento	Código
Bitácora de registro de resultados de análisis Química Clínica	FT-LA-13

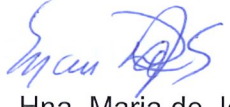
6. CONTROL DE CAMBIOS.

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Realizado	Aprobado
1	09-2023	Alta	QFB. Maria del Refugio Valadez Rivas	Mtra. Ana Cecilia Zarate Bautista
2	29/09/2025	Modificación	QFB. Maria del Refugio Valadez Rivas	Dra. Giselle Ivette De la Torre García



INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA TOMA DE MUESTRA NASOFARÍNGEA

7. AUTORIZACIÓN.

Elaboró	Revisó	Autorizó
 QFB. María del Refugio Valadez Rivas	 Dra. Giselle Ivette De la Torre García	 Hna. María de Jesús García Castro
Jefatura de Servicio de Laboratorio	Jefatura de Calidad	Dirección General